

200909 최종수정

(수정) B&E Temp / X Temp 설명서 130(65)X135 반접지 수량:5,000매

20200829 SDM-007 (Rev.2)

Manufacturer	
Authorized Representative In the European Community	
CE (Notified Body)	
Batch Code	
Date of Manufacture	
Use By	
Non Sterile	
Do not use if package is damaged	
Consult Instructions for use	
Temperature Limitation	
Keep dry	
Keep away from sunlight	
Caution	
Do not re-use	


Manufacturer
B&E KOREA Co., Ltd.
 #807, #802, B Dong, 60, Haan-ro,
 Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Korea
 Tel. 82-70-7425-2818 Fax. 82-2-6112-2816

EC Representative
BIOGERI
 Am Pflaushof 12, 22393 Hamburg, Germany
 Tel. +49-40-4143-102150 Fax. +49-40-4143-102159

B&E KOREA CO., LTD.
 B&E KOREA 1루비엔이코리아
 www.bnekorea.com

Made in Korea

Instruction for Use

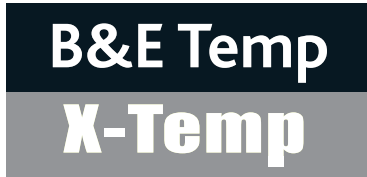

B&E Temp / X-Temp is a light-cured temporary filling materials. It has the characteristics of easy removal from cavities, high elasticity, and great strength. Until a long-term restorative material can be used to fill cavity, it has the role for maintaining the shape of a tooth.

B&E Temp / X-Temp는 탄력성과 강도를 지니고 있어 일정 기간 동안 저작력을 유지시켜 주고 한 조각 제거가 용이한 흐름성이 없는 광중합형 치과용 임시수복재이다.

B&E Temp / X-Temp는 여러 색상이 있습니다. (Yellow, Blue)



B&E Temp / X-Temp

B&E Temp / X-Temp is a light-cured temporary filling materials. It has the characteristics of easy removal from cavities, high elasticity, and great strength. Until a long-term restorative material can be used to fill cavity, it has the role for maintaining the shape of a tooth.

Application range

B&E Temp / X-Temp is applicable for the temporary filling of a variety of cavities, it is especially suitable for Inlay and Onlay.

Application method

1. Before the Application
 - 1) Check the expiration date and avoid package contamination.
 - 2) Place a disposable tip on the syringe.
2. Application
 - 1) Prepare the cavity by cleaning and drying.
 - 2) Apply the filling material to the cavities..
 - 3) Check the occlusion between B&E Temp / X-Temp and the cavity, and then remove excess of material.
 - 4) Light-curing the material for 10-20 seconds.

Package

1.2ml x 4 syringes, disposable tips
 3g x 3 syringes

Cautions

1. B&E Temp / X-Temp is only used for oral tissue.
2. Avoid contact with eyes.
3. In case of contact with the skin or eyes, clean with pure water several times, and then consult with a medical specialist if necessary.
4. Do not use expired B&E Temp / X-Temp
5. Use by trained and qualified dentist
6. For dental use only

Storage

1. Do not store it under conditions of high temperature or intense light.
2. Close the cap immediately after use.
3. Store in dry and cool place.
4. Valid for 2 years from the manufacturing date.

B&E Temp / X-Temp는 탄력성과 강도를 지니고 있어 일정 기간 동안 저작력을 유지시켜 주고 한 조각 제거가 용이한 흐름성이 없는 광중합형 치과용 임시수복재이다. B&E Temp / X-Temp는 여러 색상이 있습니다. (Yellow, Blue)

B&E Temp / X-Temp 특징

1. 한 조각으로 제거되어 제거시 편리합니다.
2. 여러가지 색상(Yellow, Blue)을 가지고 있어 선택의 폭이 넓습니다.
3. 플라스틱 니들 팁을 사용하여 부드럽게 나옵니다.
4. 기구를 사용하지 않아 달라 붙는 문제가 없습니다.
5. 와동에 직접 충전하기 때문에 사용량을 최소화 할 수 있습니다.

적용범위

1. 와동의 임시수복
2. 인레이 / 온레이 케이스의 임시수복
3. 우식 부위의 실링

적용방법

1. 사용 전 준비사항
 - 1) 사용 전 제품의 유효기간 및 포장 상태 확인 후 사용합니다.
 - 2) B&E Temp는 전용 팁을 장착합니다.
2. 사용방법
 - 1) 와동을 세척, 건조 및 준비합니다.
 - 2) B&E Temp / X-Temp를 와동에 적당량 충전합니다.
 - 3) B&E Temp 니들 팁 끝으로 다지고 교합을 맞춥니다.
 - 4) 과량의 B&E Temp / X-Temp를 제거합니다.
 - 5) B&E Temp 면에 수직으로 광조사기를 이용하여 10~20초간 광조사합니다.

포장

1.2ml x 4 syringes, disposable tips / 3g x 3 syringes

주의사항

1. 알레르기 및 부작용에 대해 주의합니다. 부작용을 최소화하기 위해 러버 댐 사용이 추천되고, 중합되지 않은 임시수복재에 대한 노출은 피합니다.
2. 발진 등의 과민 증상이 나타난 환자는 사용을 중지하고 이 병력이 있는 환자에게는 사용하지 않습니다.
3. 구강 경 조직에만 사용하므로 눈에 들어가지 않도록 주의합니다.
4. 중합 전 눈과 피부의 접촉한 경우 다량의 물로 즉시 씻은 후 의사와 상의 합니다.
5. 용도 이외의 사용이나 비전문가의 사용을 금지합니다.
6. 시술 전 반드시 기도를 보호할 정치를 합니다.

보관방법

1. 고온 및 강한 빛을 피하도록 합니다.
2. 사용 후 즉시 뚜껑을 닫아 보관합니다.
3. 건조하고 서늘한 곳에서 저장합니다.
4. 유효기간은 제조일로부터 2년입니다.

